

# 91%


在宅ストーマケアに関わる皆さまの91%以上が、コンバテック モルダブル テクノロジー™製品の使いやすさを実感しています。<sup>6)</sup>



<調査対象> 2015年10月31日 コンバテック在宅ストーマケアセミナー参加者  
48名(訪問看護師：39名 病院看護師：6名 ヘルパー：3名)

●調査対象の在宅ストーマケアに関わる皆さまには、実際にコンバテック モルダブル テクノロジー™製品とカスタムカット製品を使用いただき、使いやすさを比較していただきました。

Q コンバテック モルダブル テクノロジー™製品とカスタムカット製品のどちらが使いやすいですか?

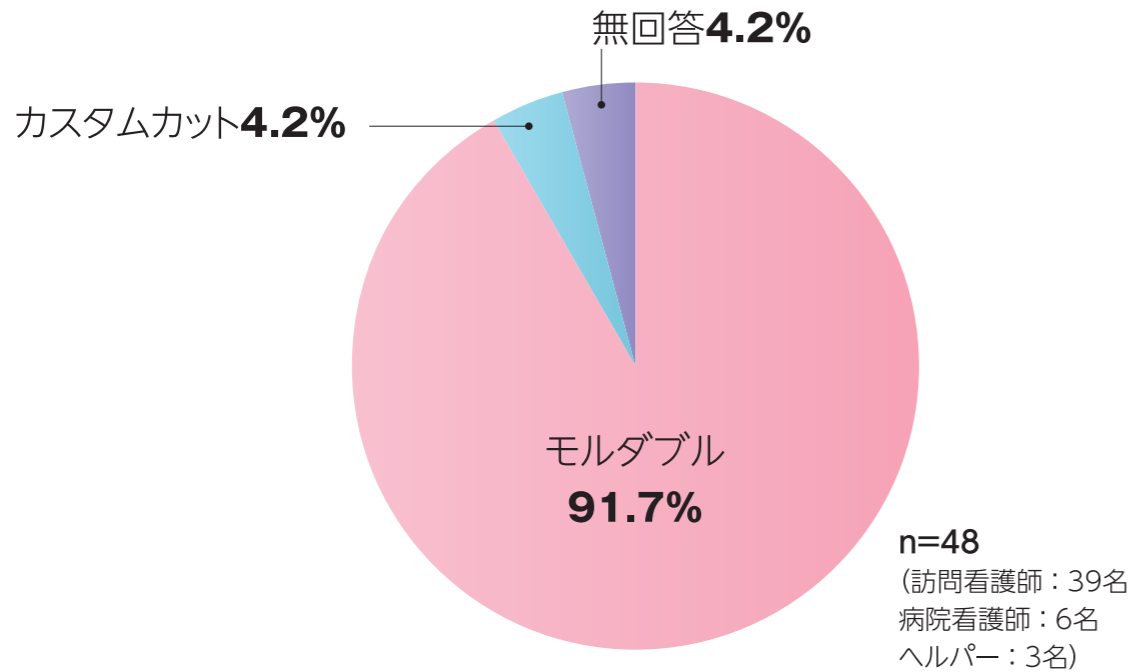

訪問看護師の皆さまにも、モルダブルの使いやすさは高く評価されています。

コンバテック 二品系ストーマ装具

## ナチュラル モルダブル製品ラインアップ

世界唯一「自然な巻き戻り」技術のコンバテック モルダブル テクノロジー™採用

選ぶなら、コンバテック  
モルダブル テクノロジー™



参考文献  
 1) Herlufsen P, Olsen AG, Carlsen B, et al. Ostomy skin study: a study of peristomal skin disorders in patients with permanent stomas. Br J Nurs 2006;15(16):854-862.  
 2) Bosio G, Pisani F, Lucibello L. A Proposal for Classifying Peristomal Skin Disorders: Results of a Multicenter Observational Study. OWM. 2007; 53(9): 38-43.  
 3) Cottam J, Richards K, Hasted A, Blackman A. Results of a nationwide prospective audit of stoma complications within 3 weeks of surgery. Colorectal Dis 2007; 9: 834-8.  
 4) Ratliff CR. Early Peristomal Skin Complications Reported by WOC Nurses. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2010; 37(5): 505-510.  
 5) Szewczyk MT, Majewska GM, Cabral MV, Hölzel-Piontek K. Osmose Study: Multinational Evaluation of the Peristomal Condition in Ostomates Using Moldable Skin Barriers. Poster presented at ECET, Paris, France, June 2013.  
 6) コンバテック 在宅ストーマケアセミナー アンケート調査, 2015年10月31日, コンバテック ジャパン株式会社

®/™はConvaTec Inc.の登録商標および商標です。© 2015 ConvaTec Inc.



輸入販売元  
**コンバテック ジャパン株式会社**  
〒106-0032 東京都港区六本木1丁目8番7号

お客様相談窓口  
**0120-532384**  
<http://www.convatec.com>

# ストーマ保有者の半数がスキントラブルを経験


ストーマ保有者の50%が皮膚トラブルを抱えているという事実<sup>1)2)</sup>。  
その皮膚トラブルの大部分は、「漏れ」に関すること。

- 34%** ストーマ保有者の34%が、術後3週間以内に皮膚トラブルを起こしています<sup>3)</sup>。
- 47%** ストーマ保有者の47%が、術後2カ月以内に皮膚トラブルを起こしています<sup>4)</sup>。
- 52%** ストーマ保有者の52%が、術後1年以内に皮膚トラブルを起こしています<sup>2)</sup>。

## 必要なのは、ストーマ近接部への しっかりとした“フィット”。

# FIT

ストーマ周囲の皮膚を保護するうえで大切なことは、  
皮膚保護剤がストーマ近接部にしっかりとフィットし、隙間をつくらないこと。  
それにより排泄物のもぐり込みを防ぐことが重要です。  
隙間があると、皮膚は排泄物の刺激にさらされてしまいます。  
コンバテック モルダブル テクノロジー™は、術後日々変化していくストーマに合わせて、  
自然に穴の大きさを変えていくので、常に隙間のない状態を保つことができます。

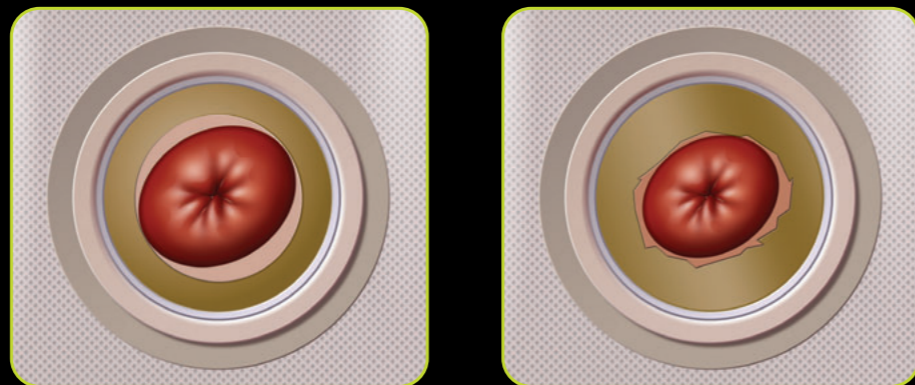

# コンバテック モルダブル テクノロジー™

隙間なく、漏れも少ない、優れた皮膚保護剤。ストーマ周囲の皮膚を健康な状態に保ちます。

指で成形、ハサミは不要

皮膚保護剤を指で巻き広げて成形することで、様々な形状やサイズのストーマに装着可能。正確にサイズを測る必要も、ハサミを使う必要もありません。

リバウンディングメモリー™

皮膚保護剤が自然に巻き戻り、日々変化するストーマにも隙間をつくりません。

タートルネック作用

皮膚保護剤部分が水分に触れると膨潤し、タートルネックのようにストーマ近接部にフィット。より強力に隙間を防ぎます。

## コンバテック モルダブル テクノロジー™が


# 証明

すること。

臨床研究において、コンバテック モルダブル テクノロジー™の確かな保護力が立証されています。


# 95%

コンバテック モルダブル テクノロジー™採用製品を使用した新規ストーマ造設者の95%以上が、皮膚を健康な状態に保っています。<sup>5)</sup>

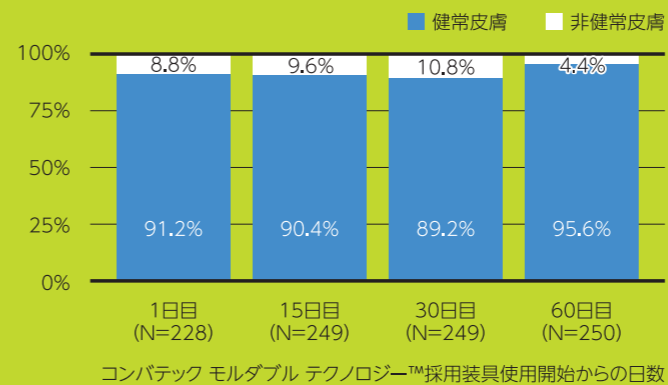

# 86%

コンバテック モルダブル テクノロジー™採用製品を使用したストーマ保有者の86%以上が、皮膚トラブルを改善しています。<sup>5)</sup>

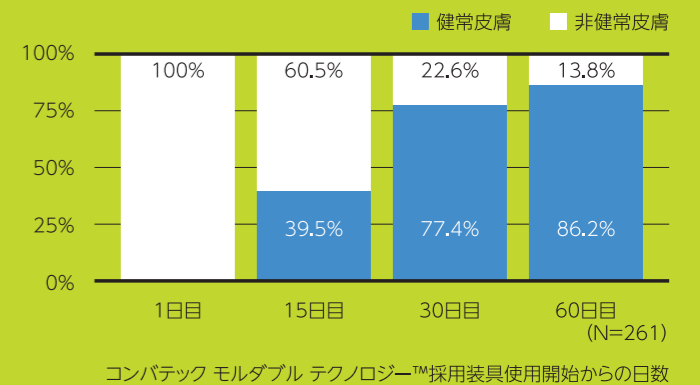

ナチュラ モルダブル 製品が選ばれる

# 理由。

ストーマ保有者の方にも、医療従事者の方にも喜ばれています

メリット  
1

## モルダブルだから


- 皮膚のトラブルリスクを軽減
  - ➡ 退院後のストーマサイズの変化にも対応してしっかりフィットし、ストーマと装具の間に隙間をつくりません。
- 素早いケアを実現できる
  - ➡ ハサミを使わずに指で成形できることで、ストーマケアの省力化が可能です。
- 均質なケアを実現できる
  - ➡ ストーマケア経験の少ない方でも、漏れることのないプロのケアが可能です。



メリット  
2

## 固定型だから

- 安定面が確保できる
  - ➡ サポートリングにより、ストーマ周囲2cmの安定面が確保できます。
- 細かいしわの補正が可能
  - ➡ 固定型フランジであれば、アクセサリーを使わなくても大丈夫です。
- しっかり固定して長期使用が可能
  - ➡ 固定型フランジでしっかり固定することで、長期間使用することができるため、装具交換する場合のコスト削減が図れます。

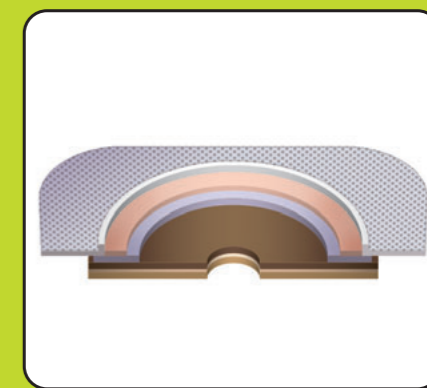

メリット  
3

## 二品系製品だから

- 直視化で貼れる
  - ➡ 自分で貼る場合も、ご家族や医療従事者の方が貼る場合も、ストーマを見ながら貼ることができるので、センターリングが簡単です。
- 袋の向きが変えられる
  - ➡ ライフスタイルに合わせて、袋の向きを自由に変更できます。




# ナチュラ モルダブル 製品ラインアップ

## 「デリケートな肌のために、よりの安心を」。2種類の皮膚保護剤で、異なるタイプのストーマをケア

ストーマ周囲の皮膚を守るためにもう一つの安心を。


ストーマ保有者の皮膚や排泄物の特性に合わせ、皮膚粘着層に「バリケア®」と「デュラヘーシブ®」という2タイプの皮膚保護剤をご用意しています。

### 皮膚のデリケートな方にはバリケア®

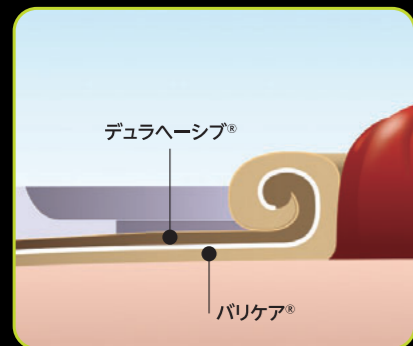

- 皮膚にとっても優しい皮膚保護剤です。
- すべてのタイプのストーマに対応します。
- 水分を素早く吸収しゲル化します。
- 湿った皮膚でも粘着性があります。
- 短期交換でも剥離刺激が少なく、皮膚に安心です。
- pHは刺激の少ない弱酸性です。

### 耐久性を求める方／水様性排泄物にはデュラヘーシブ®

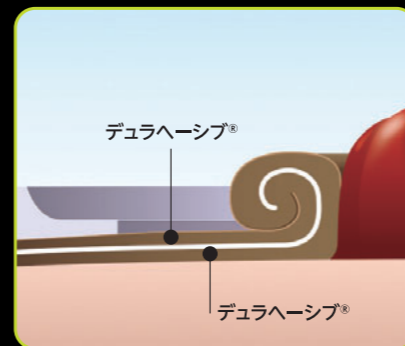

- 皮膚に優しい皮膚保護剤です。
- 水様性排泄物のストーマに最適です。
- 耐久性と密着性、柔軟性があります。
- 水分を吸収（膨潤）し、ストーマとの隙間を埋めて、排泄物のもぐり込みを防ぎます（タートルネック作用）。
- pHは刺激の少ない弱酸性です。

#### バリケア ナチュラ Mフランジ


●周囲テープは肌に優しいハイドロテープ

4,480円  
5枚



注文番号	フランジサイズ	初孔サイズ	ストーマサイズ
00295	45mm ■	S	13~22mm
00296	45mm ■	M	22~33mm
00297	57mm ■	L	33~45mm
00298	70mm ■	XL	45~56mm*

※XL(00298)の初孔の形は楕円です。

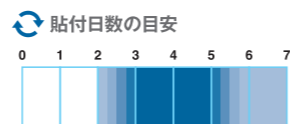

#### バリケア ナチュラ ソフトMフランジ


●周囲テープは通気性の高いアクリルテープ

8,960円  
10枚



注文番号	フランジサイズ	初孔サイズ	ストーマサイズ
413421	45mm ■	S	13~22mm
413422	45mm ■	M	22~33mm
413423	57mm ■	L	33~45mm
413424	70mm ■	XL	45~56mm*

※XL(413424)の初孔の形は楕円です。

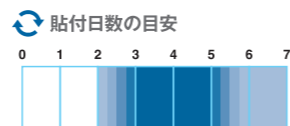

#### デュラヘーシブ ナチュラ Mフランジ


●周囲テープは肌に優しいハイドロテープ

5,940円  
5枚



注文番号	フランジサイズ	初孔サイズ	ストーマサイズ
00305	45mm ■	S	13~22mm
00306	45mm ■	M	22~33mm
00307	57mm ■	L	33~45mm
00308	70mm ■	XL	45~56mm*

※XL(00308)の初孔の形は楕円です。

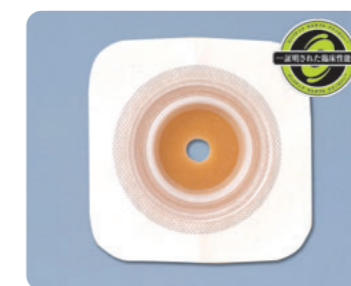

#### デュラヘーシブ ナチュラ ソフトMフランジ


●周囲テープは通気性の高いアクリルテープ

11,880円  
10枚



注文番号	フランジサイズ	初孔サイズ	ストーマサイズ
413417	45mm ■	S	13~22mm
413418	45mm ■	M	22~33mm
413419	57mm ■	L	33~45mm
413420	70mm ■	XL	45~56mm*

※XL(413420)の初孔の形は楕円です。

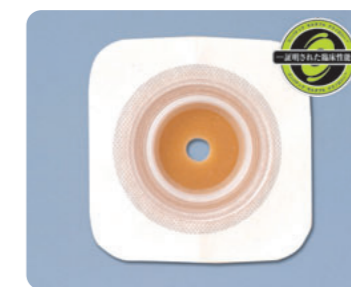


#### デュラヘーシブ ナチュラ MCフランジ

●凸面構造で、陥没・平坦なストーマの方に最適

13,820円  
10枚



注文番号	フランジサイズ	初孔サイズ	ストーマサイズ
00264	45mm ■	S	13~22mm
00265	45mm ■	M	22~33mm
00266	57mm ■	L	33~45mm

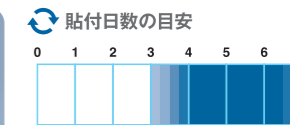

\*すべて非課税製品です。\*ご使用前に使用説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。