

エスティームボディ™ (消化管用)



※排出口を閉じた状態

Soft
凸の深さ
3.5mm

Soft
凸の深さ
7mm

凸の深さ 3.5mm

カスタムカット

注文番号	初孔サイズ	ストーマサイズ	コンベックス リングサイズ	入数	本体価格*
423654	10mm	25mmまで	30mm	10枚	8,490円
423653	10mm	35mmまで	40mm		
423652	10mm	45mmまで	50mm		
423651	10mm	55mmまで	60mm		

プレカット

注文番号	既製孔サイズ	有効径	コンベックス リングサイズ	入数	本体価格*
423646	25mm	35mmまで	40mm	10枚	8,490円
423647	窓付 30mm	35mmまで	40mm		
423648	35mm	35mmまで	40mm		

貼付日数の目安



●排泄物の性状や発汗量により変化します。



EsteemBody™

あらゆるBodyによりそい、密着

エスティームボディ™
(消化管用)

エスティームボディ™ウロ
(尿路用)



エスティームボディ™ウロ (尿路用)



Soft
凸の深さ
3.5mm

Soft
凸の深さ
7mm

凸の深さ 3.5mm

カスタムカット(アダプター2個付)

注文番号	初孔サイズ	ストーマサイズ	コンベックス リングサイズ	入数	本体価格*
423714	10mm	25mmまで	30mm	10枚	10,790円
423713	10mm	35mmまで	40mm		
423712	10mm	45mmまで	50mm		

プレカット(アダプター2個付)

注文番号	既製孔サイズ	有効径	コンベックス リングサイズ	入数	本体価格*
423706	15mm	25mmまで	30mm	10枚	10,790円
423707	20mm	25mmまで	30mm		
423708	窓付 25mm	25mmまで	30mm		
423709	30mm	35mmまで	40mm		
423710	35mm	35mmまで	40mm		

貼付日数の目安



●排泄物の性状や発汗量により変化します。




凸の深さ 7mm

カスタムカット(アダプター2個付)

注文番号	初孔サイズ	ストーマサイズ	コンベックス リングサイズ	入数	本体価格*
423727	10mm	25mmまで	30mm	10枚	10,990円
423726	10mm	35mmまで	40mm		
423725	10mm	45mmまで	50mm		

貼付日数の目安

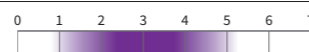

●排泄物の性状や発汗量により変化します。





スチーム保有者の方に、さらに快適な生活を過ごしていただきたい。という想いから、漏れの防止をあらためて見つめ直し、「リークディフェンス™ (=漏れの防御)」をコンセプトに、よりニーズにお応えできる製品エスティームボディ™を開発しました。

エスティームボディ™

EsteemBody™

漏れのない生活のために

一人ひとり異なる体型とスチームタイプに対応するように長年の実績がある皮膚保護剤と積み重ねられたエビデンスを基に設計された新しい軟性凸面型の単品系スチーム装具
エスティームボディ™。

エスティームボディ™
リークディフェンス™の
3つの特長

2

長年の実績がある 皮膚保護剤

コンバテックの皮膚保護剤は、ハイドロコロイドの先駆です。スチーム保有者の方が初めて貼付する時も、慣れてからも、いつも安心して使用できるように開発されました。

1

さまざまな体型に合う 凸面型装具

一人ひとり異なる体型やスチームタイプに幅広くご使用いただけるような単品系凸面型装具を取り揃えました。

3

洗練された装具の デザイン

膨らみを最小限に抑え、透けにくく防水性の高い素材のスチーム袋の設計となっています。



エスティームボディ™
特設サイト



友だち募集!
コンバテックLINE



1


Convexity さまざまな体型に合う凸面型面板

広範囲に適する軟性凸面型面板

エステームボディ™の「軟性凸面型面板」は、2つの凸面の深さから選べます。さらにそれぞれの凸面の深さに幅広いテンション位置の取り扱いがあり、広い範囲のストーマタイプに適しています。


ストーマの“突出化”

ストーマサイズに最も近いコンベックスリングサイズを選択することで、ストーマ近接部にテンションをかけることができ、ストーマの突出を図ります。この時、凸面が深い装具を選択すると、よりストーマが突出します。

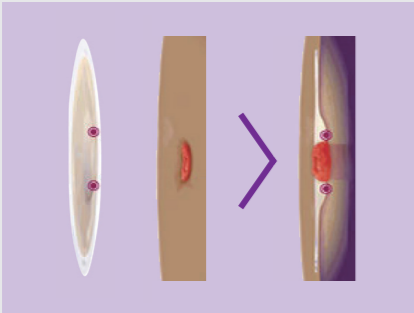


腹部の“平坦化”

ストーマサイズより大きいコンベックスリングサイズを選択することで、ストーマから離れた位置にテンションをかけることができ、腹部が平坦になります。
※実際には腹部の皺を伸ばした状態で装具を貼付する必要があります。

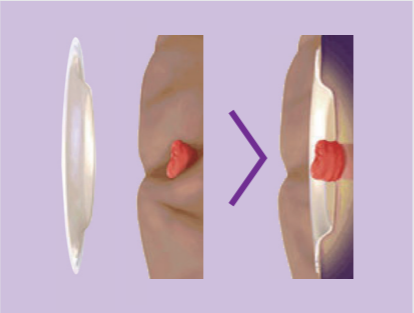

2つの凸の深さ

幅広いコンベックスリングサイズ

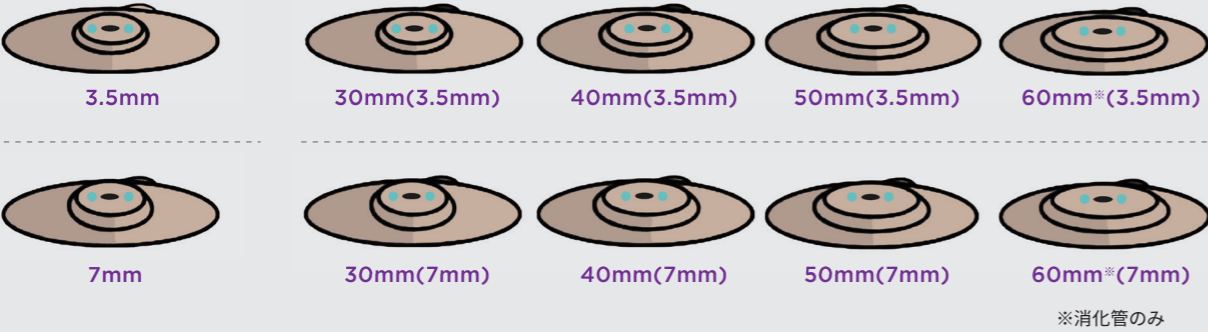

エステームボディ™ の面板

軟性凸面型 (全面皮膚保護剤)

Soft
3.5mm
凸の深さ

角度のゆるやかな形状

Soft
7mm
凸の深さ

角度のついた形状

2つの面板特性が、症例や状況に応じた選択を可能とします

3.5mm	条件	7mm
普通、または硬い腹壁	腹壁の硬さ	普通、またはやわらかい腹壁
山型～平坦型、または軽い陥凹型	腹壁の形状	平坦型～陥凹型
伸ばせる浅い皺や軽いたるみ	皺、皮膚のたるみ	伸ばせる皺や軽いたるみ、もしくは軽いオーバーハング
非突出～突出	ストーマの高さ	陥凹～突出
凸面の深さがより浅くやわらかな面板が、ストーマ周囲に追従し、浅い皺やたるみを補正		凸面の深さがより深く程よい硬さの面板が、皺やたるみを伸ばしストーマ近接部をしっかりと補正

3.5mm、7mm、それぞれの面板が実現するケアの安心感
術直後から退院・社会復帰後までのあらゆる時期に ストーマや腹壁の変化にも対応

2


Skin Barrier 長年の実績がある デュラヘーシブ®皮膚保護剤

いつでも安心して使用できるデュラヘーシブ®皮膚保護剤

乾いた肌にも湿った肌にも密着する肌に優しく、
排泄物が水様性の方にもお勧めの耐久性に優れています。
1~6日間の長期貼付が可能で、より安心なストーマケアをサポートします。


さまざまな肌に密着するデュラヘーシブ®皮膚保護剤

エステームボディ™は、デュラヘーシブ®皮膚保護剤を使用しています。
デュラヘーシブ®皮膚保護剤は、ハイドロコロイドのバイオニアであり、乾いた肌にも湿った肌にも密着する肌に優しい皮膚保護剤です。
ストーマ保有者の方が初めて貼付するときも、慣れてからも、いつも安心して使用できます。

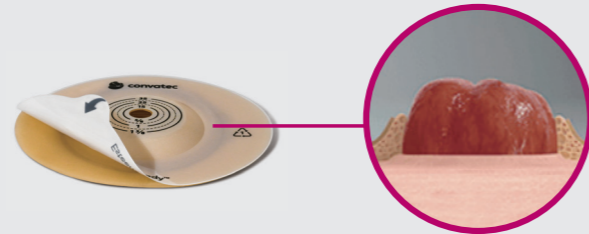


排泄物が水様性の方にもお勧めの耐久性に優れた デュラヘーシブ®皮膚保護剤


デュラヘーシブ®皮膚保護剤は、湿った肌でも同じように機能し、尿路ストーマの方や水様性排泄物の方にもお薦めの優れた耐久性となっています。
皮膚保護剤が膨潤する「タートルネック作用」により、ストーマ近接部にフィットし、より強力に密着、隙間を塞ぎます。
また、エステームボディ™の皮膚保護剤は、1~6日間の長期貼付が可能、より安心なストーマケアをサポートします。

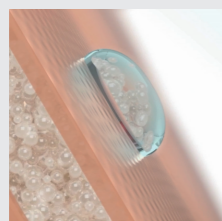


ハイドロコロイドが
水分内に移動

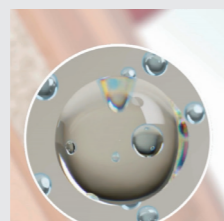

ハイドロコロイドが
水分を吸収

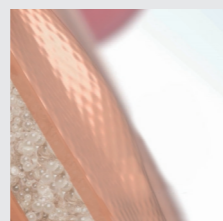

ハイドロコロイドと
水分が
ひとつになる

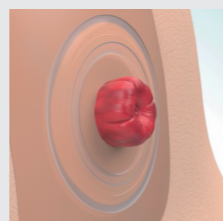

当社の皮膚保護剤は
皮膚を適切な
状態に保つよう
に作られています

3


Design 洗練された装具のデザイン

素材やデザインについても、全て見直しました。


さまざまなシーンを考慮し、ストーマ袋や排泄物が外からも
目立ちにくい素材やカラーで外出など日常生活を
より安心して過ごせるような様々な工夫を施しています。

さまざまなシーンを 考慮した素材

- 撥水性のある素材で入浴や水泳でも安心
- 白い服や薄手のシャツでも目立ちにくいストーマ袋
- 排泄物の色が透けにくい設計

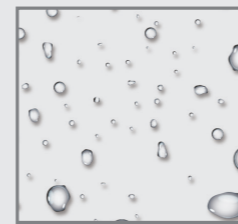


新たなデザインコンセプト によるストーマ袋の形状

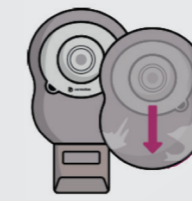

消化管用

消化管用ストーマ袋の独特な8の字型形状がストーマ袋の膨らみを抑えます。

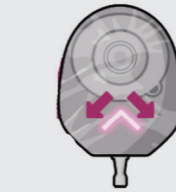

尿路用

尿路用ストーマ袋は、新たな仕切り構造でストーマ袋の膨らみを軽減します。

温かみのある 「ウォームグレー」

衣服にも透けにくく、肌との色の差が出ないように開発されただけでなく、一人ひとりに、よりそい、まるで身体の一部と感じられるように設計されています。




進化した排出口デザイン

消化管用

消化管用 下部開放型のストーマ袋の排出口は操作しやすい設計となっています。


排出口を格納できる

排出口を折りたたむと格納でき、鼠径部にあたらずに使用できます。窓付のストーマ袋の場合、排出口が収納ポケットに格納され、すっきりします。

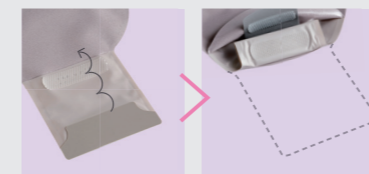

操作・排出が簡単

フラップからプレートまでの距離が長くなり、プレートの縦幅も大きくなったので、さらに操作しやすく指で簡単に開くことができます。

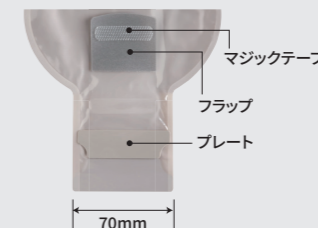

ウロ (尿路用)

ウロ (尿路用) はソフトタップ式を採用し水抜け機能も備えています。

柔らかいソフトタップ排出口

柔らかいソフトタップのため、足や体に当たっても違和感が少ないように設計されています。また、ナチュラ™プラスウロストミーパOUCHと同じソフトタップを採用しております。

水切りも出来る V字の切り込み付き

入浴時などに織布の内側に水が入ってしまっても、V字の切り込みがあるため、簡単に絞り出して排水することができます。

