

## 面板

嵌め込み式 浮動型 面板 平面型 (外周テープ付)

### バリケア® ナチュラ™ Mフランジ アコーディオン®

■モルダブル ※入数5枚 ハイロテープ

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	本体価格
421030	57mmAS	13~22mm	3,500円
421031	57mmAM	22~33mm	※非課税
421032	70mmAL	33~45mm	※非課税

貼付日数の目安 0 1 2 3 4 5 6 7 ※排泄物の性状や発汗量により変化します。

### デュラヘーシブ® ナチュラ™ Mフランジ アコーディオン®

■モルダブル ※入数5枚 ハイロテープ

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	本体価格
421036	57mmAS	13~22mm	5,000円
421037	57mmAM	22~33mm	※非課税
421038	70mmAL	33~45mm	※非課税

貼付日数の目安 0 1 2 3 4 5 6 7 ※排泄物の性状や発汗量により変化します。

### バリケア® ナチュラ™ ソフトフランジ アコーディオン®

■カスタムカット ※入数5枚 アクリルテープ

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	本体価格
421455	45mm	13~21mm	3,500円
421459	57mm	13~33mm	※非課税
421463	70mm	13~45mm	※非課税

貼付日数の目安 0 1 2 3 4 5 6 7 ※排泄物の性状や発汗量により変化します。

### デュラヘーシブ® ナチュラ™ ソフトフランジ アコーディオン®

■カスタムカット ※入数5枚 アクリルテープ

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	本体価格
421453	45mm	13~21mm	5,000円
421457	57mm	13~33mm	※非課税
421461	70mm	13~45mm	※非課税

貼付日数の目安 0 1 2 3 4 5 6 7 ※排泄物の性状や発汗量により変化します。

嵌め込み式 浮動型 面板 硬性凸面型 (外周テープ付)

### デュラヘーシブ® ナチュラ™ Cフランジ アコーディオン®

■カスタムカット ※入数5枚 ハイロテープ

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	本体価格
421633	45mm	13~22mm	6,000円
421635	57mm	13~35mm	※非課税
421637	70mm	13~48mm	※非課税

貼付日数の目安 0 1 2 3 4 5 6 7 ※排泄物の性状や発汗量により変化します。

### デュラヘーシブ® ナチュラ™ Cソフトフランジ アコーディオン®

■カスタムカット ※入数5枚 アクリルテープ

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	本体価格
421632	45mm	13~22mm	6,000円
421634	57mm	13~35mm	※非課税
421636	70mm	13~48mm	※非課税

貼付日数の目安 0 1 2 3 4 5 6 7 ※排泄物の性状や発汗量により変化します。

## ストーマ袋

嵌め込み式 消化管用 ストーマ袋

### ナチュラ™ プラス インビジクローズ® ドレインパウチ

■フィルター付

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格
416416		45mm		
416419	透明	57mm	10枚	3,720円
416422		70mm		※非課税
416417		45mm		
416420	肌色	57mm	10枚	3,720円
416423		70mm		※非課税

■フィルターなし

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格
416418		45mm		
416421	透明	57mm	10枚	3,220円
416424		70mm		※非課税

※写真は改良型ストーマ袋

### バリケア® ナチュラ™ イレオストミーパウチ

■クリップ/アダプター\*各1個、フィルター5個付

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格
420695		45mm		
420696	透明	57mm	5枚	3,110円
420697		70mm		※非課税
00332		45mm		
00333	肌色	57mm	5枚	3,110円
00334		70mm		※非課税

\*導尿バッグなどに接続する際に必要です。

### ナチュラ™ プラス クローズパウチ

■フィルターなし

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格
421680		45mm		
421682	肌色	57mm	30枚	7,450円
				※非課税

■フィルター付

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格
421681	肌色	45mm	30枚	6,800円
421683		57mm		※非課税

### ナチュラ™ プラス クローズパウチ コンパクト

■フィルター付

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格
421796	肌色	45mm	30枚	7,450円
421797		57mm		※非課税

嵌め込み式 尿路用 ストーマ袋

### ナチュラ™ プラス ウロストミーパウチ

■アダプター\*2個付

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格
413437		45mm		
413438	透明	57mm	10枚	5,800円
413439		70mm		※非課税

〈キャップ式〉 ※導尿バッグなどに接続する際に必要です。通常は使用しません。

### バリケア® ナチュラ™ ウロストミーパウチ

■アダプター\*2個付

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格
00372	透明	45mm	10枚	7,930円
00373		57mm		※非課税
00374	透明	70mm	10枚	8,040円
				※非課税

〈回転タップ式〉 ※導尿バッグなどに接続する際に必要です。通常は使用しません。

活動スタイルに合わせたストーマ装具の選択

# 支えあうストーマケア

## コンバテック おすすめ装具

### 二品系装具



# 全国の医療従事者の皆様に 二品系装具を選択する理由について さまざまな声を集めてみました

※2020.07～09調査

コンバテックは医療従事者の皆様のご意見に耳を傾け、  
**支え合うストーマケア**にも、最適な二品系装具を  
改めて提言いたします。



## User's Voice | 二品系装具が実現できること

### ストーマを直視しながら 貼付できる

- 面板を正確な位置へ貼付でき、漏れやスキントラブルの低減
- パウダー散布など処置が簡単



### 貼付期間を長くしたい場合に

- 耐久性が高い保護剤を選定する事で、装具交換の頻度と労力の低減
- 短期交換などによる脆弱な皮膚への剥離刺激の低減



### 高さのある浮動型は安心

- 指がしっかり入るため、ストーマ袋の着脱やガス抜きが容易
- リム（持ち手）が広く持ちやすいことは、腹圧を掛けずに交換が可能
- 嵌合がしやすい構造は、セルフケアの方、介助者の方にもやさしい



### トータルコストの低減に

- 単価でなくランニングコストで比較が重要
- 長期貼付で単品系と同等以上のケースも望め、コストを抑えた運用も可能



例)  
 面板：バリアケアナチュラMフレンジアコーデオンの  
 ストーマ袋：ナチュラプラスインビジブルローズドレインパウチ  
 ※1回の貼付に掛かる金額：面板700円+ストーマ袋372円=1,072円(単価)

1ヶ月間の使用金額目安

**7,504円** (4日間貼付×7回/月)

### 状況に合わせたストーマ袋の 選択が可能

- 面板種類を変えずに、便性に合わせたストーマ袋へ変更が可能
- お出掛け時はコンパクトサイズへ変更など、TPOに合わせたストーマ袋の選択



## ナチュラ™ アコーデオンの® フレンジ シリーズは、 介助者にも強いサポートツールです



### ご高齢の方にも 装着が容易

透明の蛇腹（リフター）が上方に伸張することで、指の第一関節（個人差があります）まで入ります。介助者が行うケアでもしっかりと嵌合が可能で、ご高齢の方にも装着が容易です。



### セルフケアを行う方も 簡便な操作性で安心

二品系装具の利点でもある、直視下で貼れることと併せ、ソフトリムが広く持ちやすいデザインです。着脱や排泄が行い易く、セルフケアを行う方も簡便な操作性で安心です。

## コンバテックが提言する「つなぐシンプルケア」を サポートするツーピースのおすすめ装具



## ナチュラ™ アコーデオンの® フレンジ シリーズ

リフトアップ機能で、嵌合圧を  
おなかにかけて手でする、浮動型面板

### 操作性の高いリフトアップ機能と 持ちやすいソフトリム

- 1 透明の蛇腹（リフター）が上方に伸張することで、指の第一関節（個人差があります）まで入るスペースを確保。
- 2 フレンジの直下まで指が入るためパウチとの嵌合が容易。
- 3 広く持ちやすいソフトリムは、セルフケアできる方、ケアする方、双方が操作しやすいデザイン。

## 平面（自在孔、自由孔）、凸面の3タイプ

### ハサミ不要!

平面  
（自由開孔）



### モルダブルテクノロジー™

隙間なく、漏れも少ない優れた皮膚保護剤がストーマ近接部に強力に保護します。

#### 指で成形、ハサミは不要

ハサミ不要でストーマサイズに自由に成形できます。

#### リバウンディングメモリー™

皮膚保護剤がストーマに向かって逆戻りし、日々変化するストーマとの隙間を作りません。

#### タートルネック作用

シーリング効果が高くストーマ近接部の保護能力に優れています。

### 豊富なサイズ!

平面  
（自由孔）



### カスタムカット

ストーマサイズに合わせて皮膚保護剤をカットします。13mm～45mmまでのストーマサイズに対応可能なラインアップ。45mm・57mm・70mm、3つのフレンジサイズで豊富なバリエーション。

フレンジサイズ	有効径
45mm	13～21mm
57mm	13～33mm
70mm	13～45mm

※モルダブルはフレンジサイズ45mmはありません。


### しっかり押える!

コンベックス  
（硬性凸面型）



### セキア6.65

“6.65mm”のミッドレンジの程よい高さでユニークな凸面形状がストーマを押し出し、近接部を押さえ、臍やくぼみを補正して漏れを防ぎます。

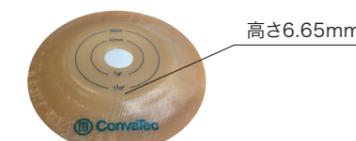

高さ6.65mm