

BEZ DOCINANIA, BEZ OBAW O PODCIEKANIE

Technologia Plastyczna Convatec™



TECHNOLOGIA PLASTYCZNA CONVATEC™

- ✔ **BRAK PODCIEKANIA**
Jedyny system, który szczelnie otula stomię i zapewnia skuteczną ochronę przed podciekaniem
- ✔ **EFEKT PAMIĘCI**
Umożliwia dopasowanie do każdego rodzaju i wielkości stomii
- ✔ **DOSKONAŁE PRZYLEGANIE**
Materiał plastyczny przylega bezpośrednio do skóry zapewniając właściwą ochronę




TECHNOLOGIA PLASTYCZNA CONVATEC™

Unikalna trójwarstwowa budowa materiału plastycznego




Efekt pamięci

Materiał plastyczny podąża za zmieniającą się w ciągu dnia stomią, zapewniając indywidualne dopasowanie.

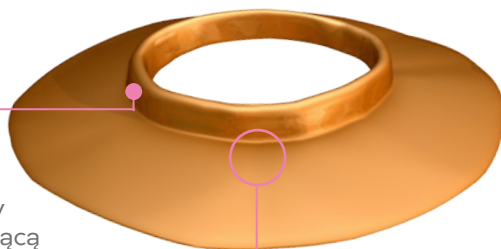

Materiał Durahesive®

Warstwa hydrokoloidowego materiału, który „puchnie” pod wpływem wilgoci, tworząc ochronny kołnierz. Materiał Durahesive® szczelnie otula stomię, zapobiega podciekaniu i chroni skórę wokół stomii przed podrażnieniami.

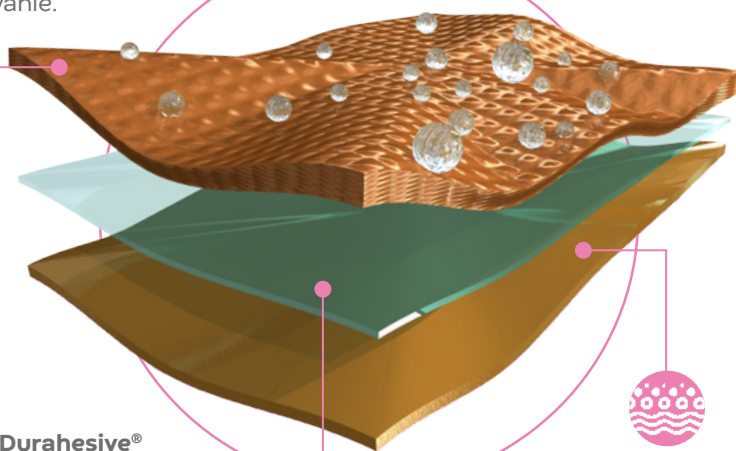

Film polietylenowy

Wodoodporny i trwały, zapewnia elastyczność.



Materiał Stomahesive®

Hydrokoloidowy materiał Stomahesive® przylega bezpośrednio do skóry i zapewnia jej właściwą ochronę przed drażniącym działaniem treści jelitowej lub moczu.

*W zależności od rodzaju płytki, warstwa przylegająca do skóry może być wykonana z materiału Stomahesive® lub Durahesive®.



Materiał plastyczny dopasowuje się do stomii okrągłych, owalnych lub o nieregularnych kształtach.


TECHNOLOGIA PLASTYCZNA CONVATEC™

Idealne dopasowanie do stomii

Przylepce wykonane w Technologii Plastycznej Convatec™ zapewniają indywidualne dopasowanie do kształtu i rozmiaru stomii.

Dostępne są w systemach Esteem™+, Natura®+ i Esteem Synergy®+.

Cztery kroki do idealnego dopasowania

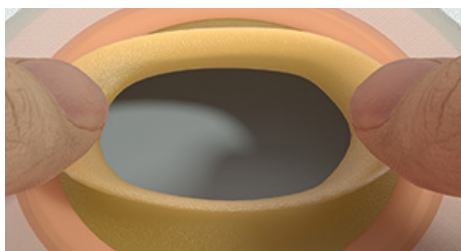

KROK 1:

Wymodeluj palcami otwór dopasowany do wielkości i kształtu stomii.




KROK 2:

Umieść przylepiec na skórze wokół stomii.



KROK 3:

Dzięki „efektowi pamięci” materiał plastyczny dopasuje się do zmieniającej się w ciągu dnia wielkości i kształtu stomii.

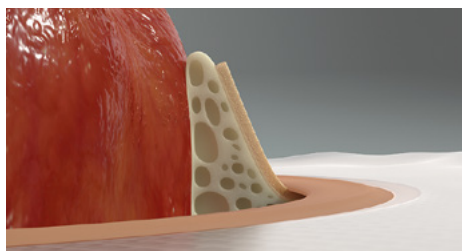

KROK 4:

Materiał hydrokoloidowy Durahesive® chłonie wilgoć tworząc ochronny kołnierz otulający stomię, dzięki czemu zapobiega podciekaniu.

ESTEEM™ PLASTYCZNY

System jednoczęściowy

Posiada unikalny przylepiec do modelowania palcami stworzony w Technologii Plastycznej™ Convatec.

WOREK OTWARTY

Okno podglądu

Ułatwia zakładanie worka, monitorowanie stomii i poziomu wypełnienia worka.



Praktyczna i wygodna „kieszonka”

do schowania odpływu worka.



Plastikowa rzepowa zapinka InvisiClose®

wykonana w technologii „haczyk do haczyka”.



Szeroki odpływ

ułatwia opróżnianie i czyszczenie worka.



Skuteczny filtr węglowy

Neutralizuje zapachy i zapobiega balonowaniu się worka.



Plastyczny przylepiec do modelowania



Materiał Stomahesive®



Delikatny i miękki materiał,

który nie szeleści i nie przykleja się do ciała.



Odpływ worka

wykonany z materiału, który nie pochłania wilgoci i zapachu.



Plastikowe listewki

ułatwiają opróżnianie worka.

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.

UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.



RZĘPOWA ZAPINKA INVISICLOSE®

Bezpieczne zamknięcie worka, które jest na tyle pewne, że nie wymaga stosowania dodatkowej zapinki.



KIESZONKA DO SCHOWANIA ZAPINKI

Pozwala ukryć zamknięty odpływ worka, co skraca worek i sprawia, że jest bardziej dyskretny.



Esteem™ PLASTYCZNY worek zamknięty średni

Rozmiar stomii (mm)	Kolor	Numer katalogowy systemu	Numer katalogowy SAP	Ilość sztuk w opakowaniu
20-30	beżowy z okienkiem	413509	1708110	30
30-40	beżowy z okienkiem	413510	1708111	30
40-50	beżowy z okienkiem	413511	1708112	30



Rozmiar stomii (mm)	Kolor	Numer katalogowy systemu	Numer katalogowy SAP	Ilość sztuk w opakowaniu
20-30	beżowy z okienkiem	413521	1708131	10
30-40	beżowy z okienkiem	413522	1708132	10
40-50	beżowy z okienkiem	413523	1708133	10
20-30	przezroczysty	413515	1708125	10
30-40	przezroczysty	413516	1708126	10
40-50	przezroczysty	413517	1708127	10


Przewidziane zastosowanie: do zaopatrzenia kolostomii lub ileostomii.

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

NATURA®

System dwuczęściowy

System dwuczęściowy Natura®+ składa się z płytki stomijnej i worka dopinanego do płytki za pomocą pierścienia zatraskowego.

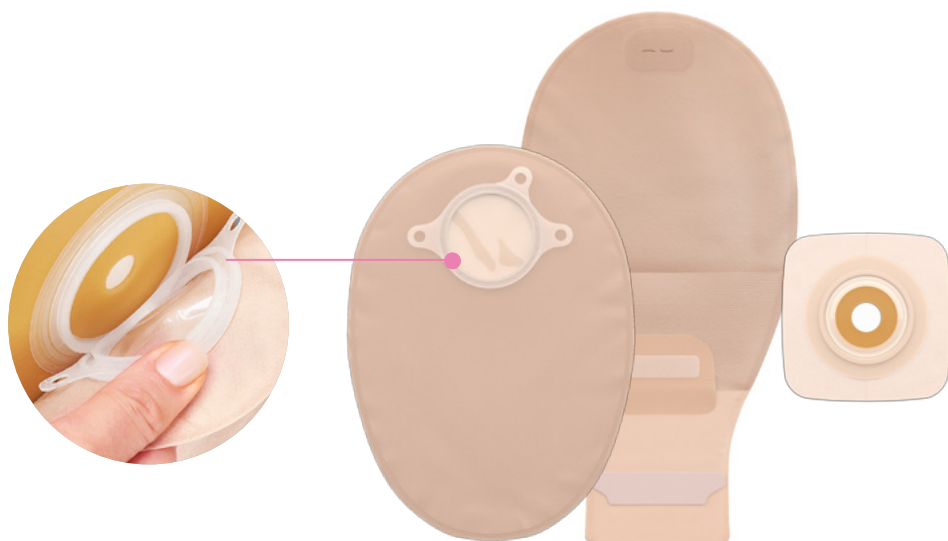

OZNACZENIE KOLORYSTYCZNE ROZMIARU						
ROZMIAR PIERŚCIEŃ ZATRZASKOWEGO	32mm	38mm	45mm	57mm	70mm	100mm


Przewidziane zastosowanie: do zaopatrzenia kolostomii, ileostomii lub urostomii.

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

NATURA® STOMAHESIVE®

Płytką plastyczną

Materiał plastyczny puchnie i dokładnie „otula” stomię, zapewniając szczelność i bezpieczeństwo stosowania.

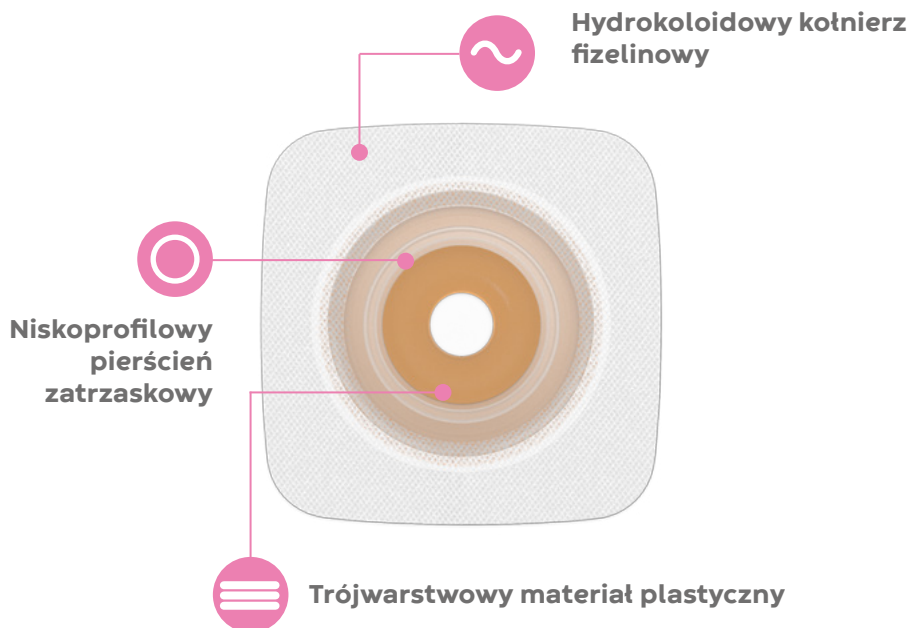

	Rozmiar pierścienia zatrzaskowego (mm)	Rozmiar stomii (mm)	Numer katalogowy systemu	Numer katalogowy SAP	Ilość sztuk w opakowaniu
●	45	13-22	411809	1701060	5
●	45	22-33	411811	1701062	5
●	57	33-45	411813	1701064	5
●	70	33-56	411815	1701066	5

Przewidziane zastosowanie: do zaopatrzenia kolostomii, ileostomii lub urostomii.


TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.

UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

NATURA® DURAHESIVE®

Płytką plastyczną Convex®

Płytką posiada wypukły kształt i jest dedykowana osobom ze stomią wklęsłą lub płaską.

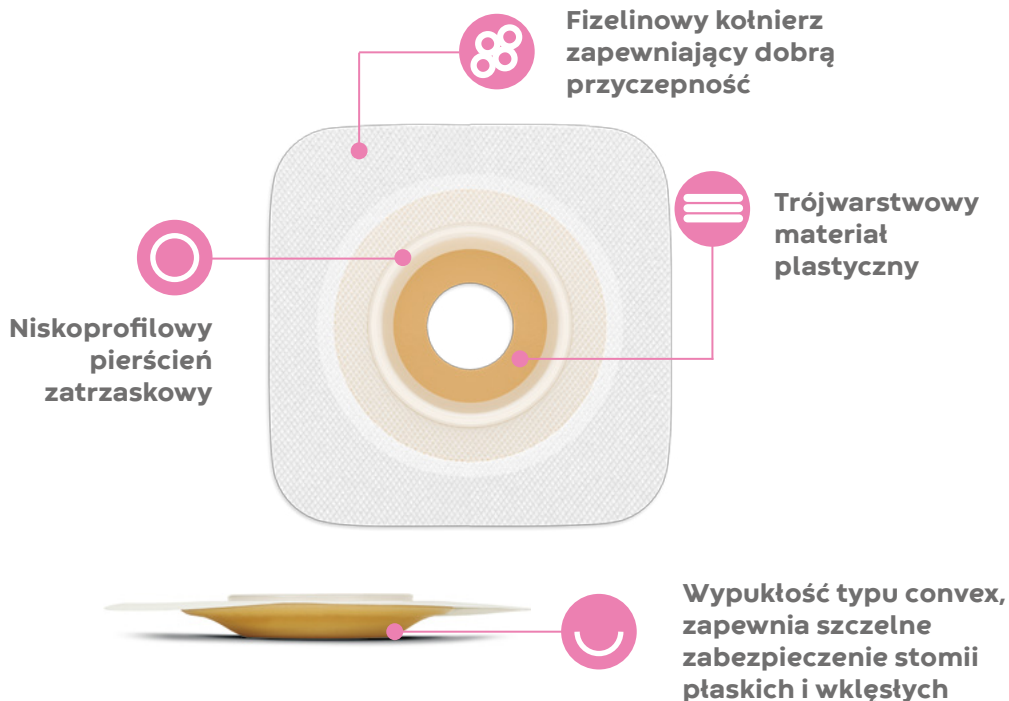

	Rozmiar pierścienia zatrzaskowego (mm)	Rozmiar stomii (mm)	Numer katalogowy systemu	Numer katalogowy SAP	Ilość sztuk w opakowaniu
●	45	13-22	420233	1701098	5
●	45	22-33	420234	1701099	5
●	57	33-45	420235	1701100	5

Przewidziane zastosowanie: do zaopatrzenia kolostomii, ileostomii lub urostomii.


TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.

UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

NATURA® STOMAHESIVE®

Płytką plastyczną akordeonową

Specjalny akordeonowy pierścień umożliwia komfortowe połączenie worka z płytką bez ucisku na powłoki brzuszne.

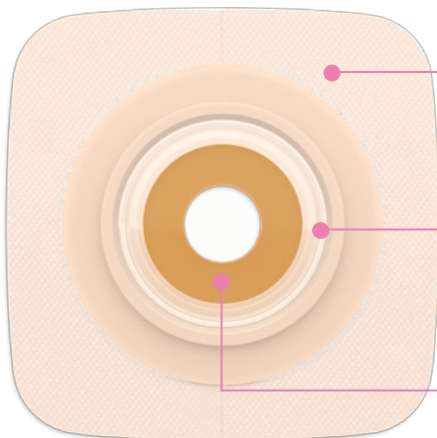

**Hydrokoloidowy
kotnierz fizelinowy**

**Niskoprofilowy
pierścień zatrzaskowy
umieszczony na
akordeonie**

**Trójwarstwowy
materiał plastyczny**



**Złożony akordeon daje niskoprofilowe,
a tym samym dyskretne połączenie.**



**Uniesiony akordeon to łatwość
w połączeniu płytki i worka bez ucisku
na powłoki brzuszne.**

	Rozmiar pierścienia zatrzaskowego (mm)	Rozmiar stomii (mm)	Numer katalogowy systemu	Numer katalogowy SAP	Ilość sztuk w opakowaniu
●	57	13-22	421030	1709713	5
●	57	22-33	421031	1709714	5
●	70	33-45	421032	1709715	5

Przewidziane zastosowanie: do zaopatrzenia kolostomii, ileostomii lub urostomii.

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.

UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA BADANIAM¹

Technologia Plastyczna Convatec™

PONAD 95%
pacjentów zachowało
zdrową skórę wokół stomii
po zastosowaniu sprzętu
stomijnego wykonanego
w Technologii Plastycznej
Convatec™, jako pierwszy
sprzęt po operacji¹



**U 86% osób, które zmieniły sprzęt stomijny na sprzęt
plastyczny Convatec, nastąpiła znaczna poprawa kondycji
skóry wokół stomii¹**

Sprzęt stomijny wykonany w Technologii Plastycznej Convatec™:

- ✔ nie wymaga docinania
- ✔ dopasowuje się do zmieniającego się w ciągu dnia kształtu i wielkości stomii
- ✔ szczelnie otula stomię ponieważ przylepiec „puchnie” pod wpływem wilgoci
- ✔ zapobiega podciekaniu i chroni skórę wokół stomii przed podrażnieniami
- ✔ jest łatwy w aplikacji - wymaga mniej czynności w przygotowaniu przylepca w porównaniu do tradycyjnych przylepców do docinania
- ✔ sprawdza się u osób, które mają problemy manualne i nie radzą sobie z wycinaniem precyzyjnych otworów

¹ Referencje:

Podsumowanie kliniczne: Badanie Osmose, Międzynarodowe badanie stanu skóry wokół stomii u nowo operowanych pacjentów stosujących płytki plastyczne Convatec. Dane Convatec Inc.

AKCESORIA STOMIJNE

Przewidziane zastosowanie: do pielęgnacji i ochrony skóry wokół stomii (kolostomii, ileostomii lub urostomii)



PIELĘGNACJA I OCHRONA SKÓRY



PRESENTA® Pianka do pielęgnacji i ochrony skóry wokół stomii

Zawiera składniki myjące, które delikatnie oczyszczają i pielęgnują skórę wokół stomii. Do stosowania zamiast wody i mydła. Bez spłukiwania.

Pojemność	Numer katalogowy systemu	Numer katalogowy SAP
200 ml	423294	1733067



PIELĘGNACJA I OCHRONA SKÓRY



PRESENTA® Żel do ochrony skóry wokół stomii

Tworzy na skórze nawilżająco-ochronną barierę dzięki liczным substancjom nawilżającym.

Pojemność	Numer katalogowy systemu	numer katalogowy SAP
50 ml	423295	1733068



PIELĘGNACJA I OCHRONA SKÓRY



PRESENTA® Chusteczki do pielęgnacji i ochrony skóry wokół stomii

Skutecznie oczyszczają skórę wokół stomii. Łagodzą podrażnienia. Wspierają tworzenie bariery ochronnej skóry.

Ilość sztuk w opak.	Numer katalogowy systemu	Numer katalogowy SAP
24	423524	1735384



USUWANIE PRZYLEPCA



ESENTA™ spray medyczny do usuwania przylepca, nieszczipiący

Do bezbolesnego i szybkiego usuwania sprzętu stomijnego i opatrunków z przylepcem.

Pojemność	Numer katalogowy systemu	Numer katalogowy SAP
50 ml	423289	1729206

TO SĄ WYROBY MEDYCZNE.

UŻYWAJ ICH ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

Podmiot prowadzący reklamę: Convatec Polska Sp. z o.o.

Producent: Convatec Limited

Upoważniony przedstawiciel: UNOMEDICAL A/S

- Esteem™ + PLASTYCZNY worek zamknięty średni,
- Esteem™ + PLASTYCZNY worek otwarty średni,
- Natura® Stomahesive® płytka plastyczna,
- Natura® Durahesive® płytka plastyczna Convex®,
- Natura® Stomahesive® płytka plastyczna akordeonowa,
- ESENTA™ Spray medyczny do usuwania przylepca, nieszczypiący

Producent: Gofarm Sp. z o.o. Sp.k.

PRESENTA® Pianka do pielęgnacji i ochrony skóry wokół stomii,

PRESENTA® Chusteczki do pielęgnacji i ochrony skóry wokół stomii

PRESENTA® Żel do ochrony skóry wokół stomii

PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE MOŻESZ DO NAS ZADZWONIĆ!

Bezpłatny numer linii informacyjnej

800 120 093

(pon. - pt., 9.00 - 17.00).

Numer dyżurny 608-555-536* działający:

od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00 - 20.00

sobota w godzinach 10.00 - 14.00

* Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora

Convatec Polska sp. z o.o.,

al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, tel. 22 579 66 50

dział.pomocy@convatec.com

®/™ oznacza zastrzeżony znak towarowy Convatec Inc.

© Convatec Polska sp. z o.o., czerwiec 2023

OC/50/06/2023 | AP-63557-POL-POL-v1

www.convatec.pl
www.stomia.pl

